



# Legipid<sup>®</sup> Legionella Schnelltest

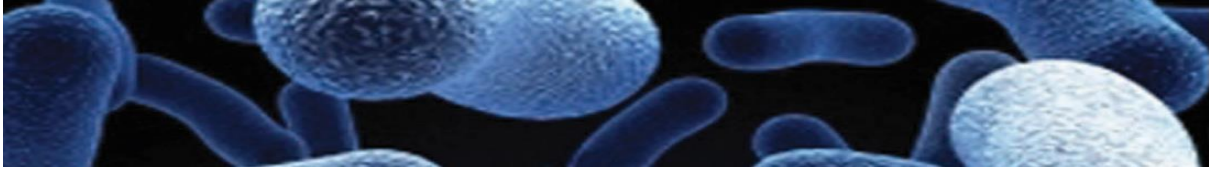

Test basierend auf magnetischer Immunbindung und Enzymimmunoassay (CEIA) für die schnelle Bestimmung von *Legionella pneumophila* in Wasserproben

Der Legipid Test besteht aus 3 Schritten:

1. Aufkonzentrieren der Probe → 2. Analyse Binden → Markierung → Detektion → 3. Interpretation und Ergebnisreport

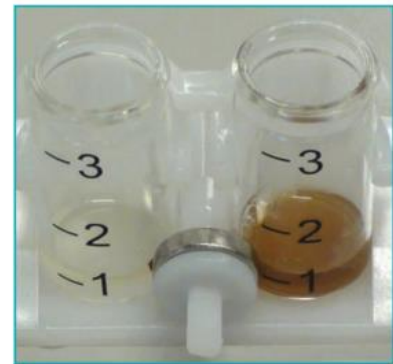

Die Testdauer beträgt lediglich 50 Minuten

Basisausstattung zur Testdurchführung



Der Legipid Basis Kit wird in einem Koffer angeboten, welcher alle notwendigen Reagenzien und Bestandteile für 10 Tests enthält .

Alle verbrauchten Reagenzien können einzeln nachbestellt werden.

Lagertemperatur der Reagenzien: 2°C-8°C

Eine zur Aufkonzentrierung notwendige Membranfiltration ist im Basis Kit nicht enthalten , kann aber zusätzlich bestellt werden

Die Validierung des Tests erfolgte durch das weltweit anerkannte AOAC Research Institut

